
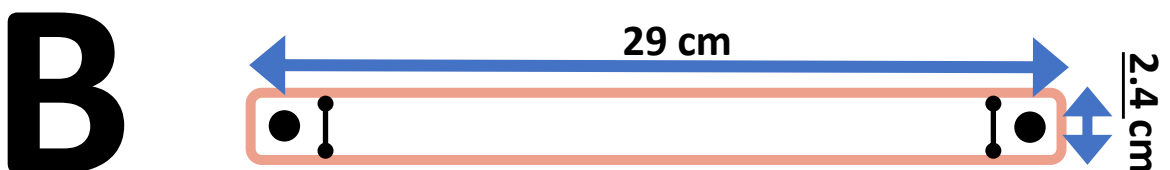


MÁSCARA DE PROTECCIÓN CASERA

Materiales necesarios

- Lámina PET de botellas plásticas lisas.
- 2 Cordones, tiras de tela o 1 elástico.
- Abrochadora
- Perforadora de escritorio
- Tijera
- Cutter

Medidas de las láminas

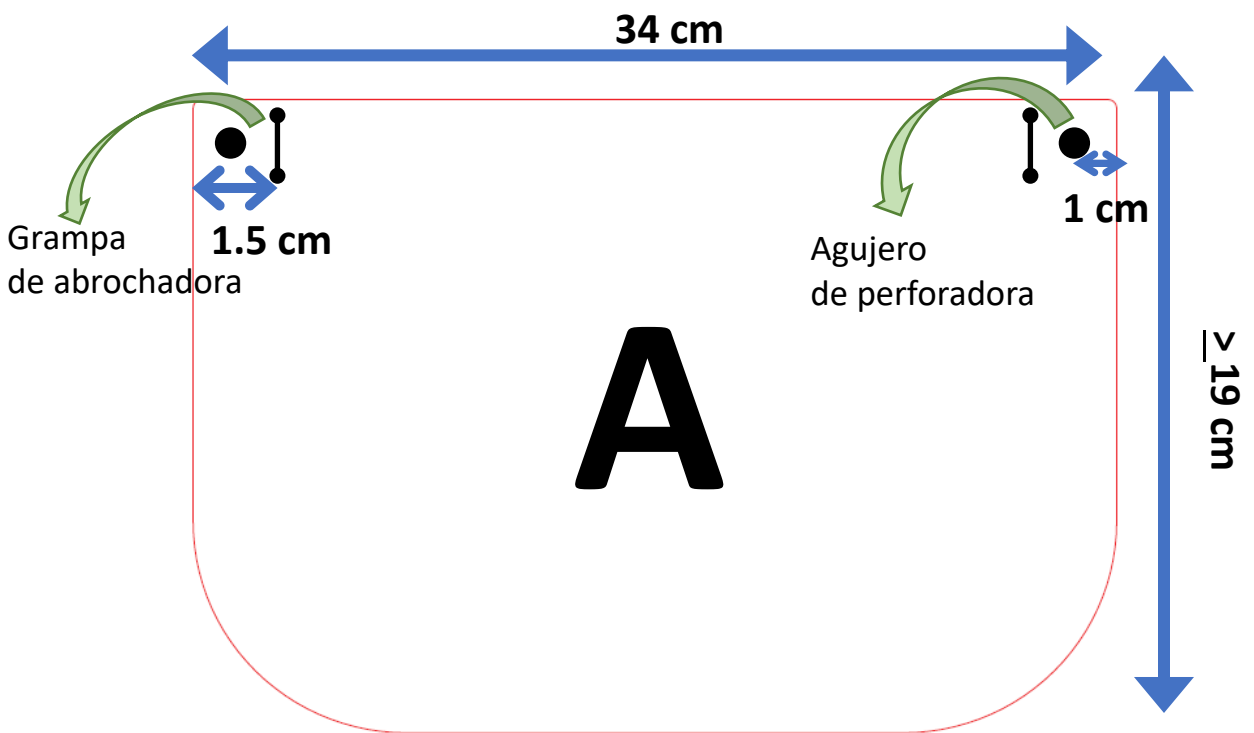

Instrucciones de armado

1



Tome una botella transparente y lisa (ejemplo: de soda, gaseosas de al menos 2 litros).

2



Corte los extremos de la botella con un cutter.

3



Abra la botella realizando un corte a lo largo con una tijera

4



Limpie el pegamento de la etiqueta con aguarrás o alcohol

5



Marque y recorte el modelo A de la página anterior

6



Tome otra lámina de plástico (puede ser opaca y/o de color)

7



Recortar con tijera según las medidas del molde B

8



Superponga A con B y marque las posiciones de los agujeros (1cm del borde) y grampas (2cm del borde)

9



Abroche con abrochadora a 1.5cm del borde, de cada lado

10



Perfore con perforadora a 1cm del borde, de cada lado

11



Ate un cordón, tela o elástico en cada agujero

12



Así se verá desde arriba

13



Ajustar la máscara con un nudo entre los dos cordones o elásticos